

tempolink® clear



Instructions for use

Temporary luting cement, dual-hardening, for crowns and bridges, eugenol-free – resin based, with triclosan

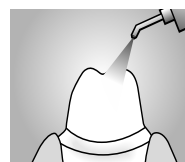


Fig. 1

1. Cleaning the preparation

Before cementing, clean the preparations with water. If the preparation has been disinfected beforehand, remove all traces of disinfectant from the surface. Dry the preparation area and dry the temporary restoration (Fig. 1).

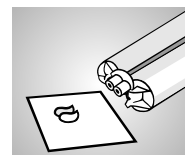


Fig. 2

2. Mixing and applying

Dispensing is performed with the mini-mix system. Insert plunger into the body of the cartridge. Remove the cap from the cartridge by turning. Before fitting the mixing cannula, dispense a small quantity of material until material emerges from the two openings uniformly (Fig. 2). When attaching the mixing cannula observe the guides on the cannula and cartridge. Lock in place by turning clockwise (Fig. 3). Before each application dispense and discard a small quantity. Dispensing can now be performed to suit requirements. Dispense material with uniform pressure. After use, leave the mixing cannula on the cartridge until the next application.

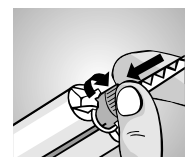


Fig. 3

3. Inserting the temporary restoration

Apply a thin layer of **tempolink® clear** to the interior of the temporary restorations (Fig. 4). Directly after that, position the temporary restorations on the preparations by applying slight pressure (Fig. 5), then press them on firmly. Remove any excess material with a suitable instrument (Fig. 6).

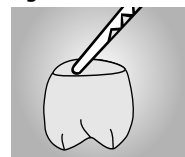


Fig. 4

4. Working time / light curing

The working time at room temperature is approx. 90 sec. Curing at body temperature takes approx. 5 min. and can be delayed outside the mouth. **Setting can be assisted and speeded up at any time by light curing.** For this purpose we recommend an exposure time of 20 sec. per surface (Fig. 7). If the temporary restorations are very opaque, extend light curing to 30 - 40 sec.

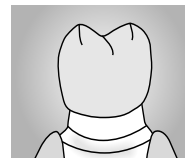


Fig. 5

Important working hints

- **tempolink® clear** is compatible with permanent cements.
- **tempolink® clear** does not have a delaying effect on the curing of composite cement or composite restorative material.
- In the case of composite-based and build-up restorations isolate these areas by applying a thin layer of glycerine or Vaseline in order to prevent adhesion of **tempolink® clear**.
- Before using **tempolink® clear** do not apply any methacrylate-based bonder, dentine sealant or desensitizer.
- The use of **smartprotect®** / **smartprotect® soft** is recommended before cementation.
- **tempolink® clear** does not contain eugenol.
- In very rare cases **tempolink® clear** may cause sensitization. If such reactions should occur, discontinue using **tempolink® clear**.
- Manual mixing of the components is not recommended.
- Do not allow individual components to come into contact with skin or mucous membrane.
- Do not leave any residues of material in the mouth.



Fig. 6


For dental use only.




Fig. 7

Dual-hardening system

light curing:

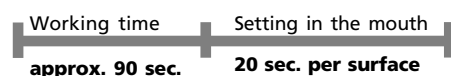

self curing:

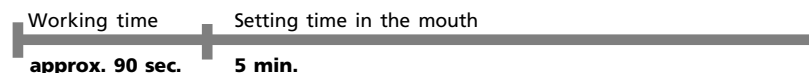

Applications:

- Temporary luting of crowns and bridges
- Temporary luting of permanent restorations

Technical data:

- **Mixed volume:** 5 ml (mini-mix)
- **Mixing ratio:** 4:1
- **Colour code:** Base: transparent
Catalyst: opaque
- **Mixing time:** omitted (mini-mix)
- **Working time:** approx. 90 sec.*
- **Setting time in the mouth:** light curing: 20 sec. per surface
self curing: 5 min.
- **Application:** At 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5% rel. humidity
- **Storage:**



* from beginning of mixing at 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5% rel. humidity. Increased temperatures accelerate, decreased temperatures retard a. m. times.

Ordering information:

tempolink® clear 02593
cartridge of 5 ml mini-mix 4:1
8 mixing cannulas 4:1,
brown

tempolink® single 02598
cartridge of 5 ml mini-mix 1:1
8 mixing cannulas 1:1,
brown

Mixing cannulas 4:1 02591
brown, 25 pcs.

Mixing cannulas 1:1 02761
brown, 25 pcs.

DETAX

GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 4 · 76275 Ettlingen/Germany
www.detax.de · post@detax.de



IM05

Made in Germany



02/2012

Ciment provisoire pour couronnes & bridges, à double polymérisation, sans eugérol – à base de résine, avec triclosan

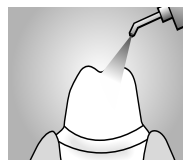


Fig. 1

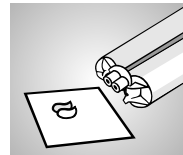


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

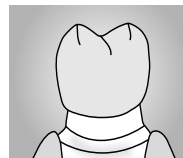


Fig. 5

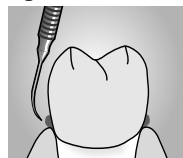


Fig. 6



Fig. 7

1. Nettoyage et préparation

Nettoyer le moignon dentaire préparé avec de l'eau avant la cimentation. En cas de désinfection antérieure de la préparation, éliminer toute trace de désinfectant de la surface du moignon. Sécher la zone du moignon (Fig. 1).

2. Mélange et application

La sortie du ciment se fait par pression en utilisant un système mini-mix. Introduire le piston dans le cylindre de la cartouche. Retirer la fermeture de la cartouche en imprimant un mouvement de rotation. Avant de mettre la canule de mélange en place, faire sortir un peu de produit jusqu'à ce qu'une quantité égale de produit sorte des deux canaux de sortie (Fig. 2). Lors de la mise en place de la canule de mélange, faire attention aux canaux de sortie sur cette dernière et sur la cartouche. Bloquer par un mouvement dans le sens inverse. Avant toute application, faire sortir un peu de produit et le jeter (Fig. 3). Le produit peut à présent être dosé individuellement. Appliquer le produit avec une pression égale. Après l'utilisation, laisser la canule de mélange en place sur la cartouche jusqu'à la prochaine utilisation.

3. Mise en place de l'implant provisoire

Étaler une couche mince de **tempolink® clear** sur la face interne de l'implant provisoire (Fig. 4). Immédiatement après, mettre l'implant provisoire en place avec une légère pression sur la préparation (Fig. 5). Ensuite, appuyer fortement. Éliminer l'excès de produit immédiatement (avant le durcissement) soit avec un coton-tige humide, soit avec un instrument (détartreur ou fil dentaire, Fig. 6).

4. Temps de travail du matériau / photopolymérisation

Le temps de travail du matériau à température ambiante est de 90 sec. environ. Le durcissement à température corporelle est de 5 min. environ et peut être ralenti hors de la bouche. **Le durcissement peut être à tout moment accéléré et assisté par photopolymérisation.** Pour ce faire, une durée d'éclairage de 20 sec. par surface est recommandée (Fig. 7). Pour les implants provisoires très opaques, la photopolymérisation peut être allongée à 30 - 40 sec.


Renseignements de travail importants

- **tempolink® clear** est compatible avec les ciments permanents.
- **tempolink® clear** n'exerce pas d'effet retardateur sur le durcissement des ciments composites ou des matériaux de plombage composites.
- Lors des travaux avec des matériaux composites, isoler les zones avec de la glycérine ou de la vaseline afin d'éviter toute adhésion de **tempolink® clear**.
- Avant l'usage de **tempolink® clear**, n'utiliser aucune colle à base de méthacrylate, aucun agent de scellage de la dentine et aucune solution de désensibilisation.
- L'utilisation de **smartprotect® / smartprotect® soft** est recommandée avant la pose définitive de l'implant final.
- **tempolink® clear** ne contient pas d'eugérol.
- Dans de très rares cas, une sensibilisation peut être causée par **tempolink® clear**. Dans l'éventualité de l'apparition d'une telle réaction, interrompre l'utilisation de **tempolink® clear**.
- Une distribution et un mélange manuel(le) des composantes ne sont pas recommandés.
- Éviter tout contact entre les composantes et la peau ou les muqueuses.
- Ne pas laisser de reste de produit dans la bouche du patient.


Pour l'usage dentaire seulement.

Polymérisation en deux temps

photopolymérisation:

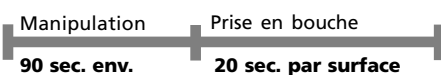

autopolymérisation:

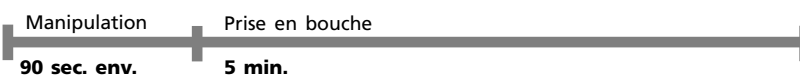

Possibilités d'utilisation:

- Fixation temporaire des couronnes et bridges
- Fixation temporaire des restaurations permanentes

Caractéristiques techniques:

- **Volume de mélange:** 5 ml (mini-mix)
- **Dosage:** 4:1
- **Couleurs du produit:** Base: transparent Durcisseur: opaque
- **Temps de mélange:** ne s'applique pas (système de mini-mix)
- **Temps de manipulation:** env. 90 sec.
- **Prise en bouche:** photopolymérisation: 20 sec. par surface autopolymérisation: 5 min.
- **Application:** À 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% d'humidité relative.
- **Stockage:**



* dès initiation du mélange à 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% d'humidité relative. Des températures élevées accélèrent, des températures basses retardent les temps indiqués.

Informations à la commande:

tempolink® clear 02593
cartouche de 5 ml
mini-mix 4:1
8 canules de mélange 4:1, brunes

tempolink® single 02598
cartouche de 5 ml
mini-mix 1:1
8 canules de mélange 1:1, brunes

Canules de mélange 4:1
brunes, 25 unités **02591**

Canules de mélange 1:1
brunes, 25 unités **02761**

tempolink® clear

E
Modo de empleo

Cemento provisional de polimerización dual para coronas y puentes, sin eugenol – de base de plástico, con triclosan



Fig. 1

1. Limpieza de la preparación

Antes del cementado limpie los muñones dentales con agua. Si anteriormente ha desinfectado la preparación, limpie la superficie de los muñones para eliminar completamente los restos de desinfectante. Seque la zona del muñón y la prótesis provisional (Fig. 1).

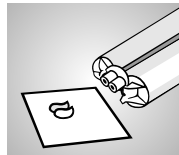


Fig. 2

2. Mezcla y aplicación

La inyección se realiza con el sistema mini mix. Introduzca el émbolo en el cartucho. Desenrosque el cierre del cartucho y retírelo. Antes de colocar las cánulas mezcladoras, presione para que salga un poco del material hasta que por ambas salidas se expulse el mismo volumen de material (Fig. 2). Para colocar las cánulas mezcladoras tenga en cuenta las guías que hay en las cánulas y en el cartucho. Bloque girando en el sentido contrario (Fig. 3). Antes de cada aplicación expulse una pequeña cantidad y deséchela. Ahora puede realizar la dosificación de forma individual. Eyecte el material ejerciendo una presión uniforme. Después de usar las cánulas mezcladoras, déjelas en el cartucho hasta que lo vuelva a utilizar.



Fig. 3

3. Colocación de la prótesis provisional

Aplique en la cara interior de la prótesis provisional una fina capa de **tempolink® clear** (Fig. 4). A continuación coloque la prótesis provisional en la preparación presionando ligeramente (Fig. 5), cuando esté en la posición correcta presione con fuerza. Elimine el exceso de material con un instrumento adecuado (Fig. 6).



Fig. 4

4. Tiempo de manipulación / fotopolimerización

El tiempo de manipulación es de aprox. 90 s a temperatura ambiente. El fraguado a temperatura corporal se produce al cabo de aprox. 5 min, este tiempo es mayor fuera de la boca. **Para ayudar al fraguado y acortar el tiempo puede utilizarse en todo momento la fotopolimerización.** Se recomienda un periodo de exposición a la luz de 20 s por superficie (Fig. 7). En el caso de prótesis provisionales muy opacas el tiempo de fotopolimerización debe ampliarse a 30- 40 s.

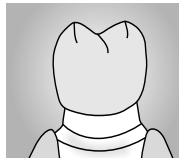


Fig. 5

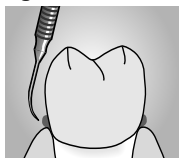


Fig. 6

Instrucciones importantes de procesamiento

- **tempolink® clear** es compatible con cementos permanentes.
- **tempolink® clear** no retrasa el fraguado de cementos compuestos ni de materiales compuestos de obturación.
- En el caso de pilares con base de composite, la zona deberá recubrirse con una delgada capa de glicerina o vaselina para evitar que el **tempolink® clear** se quede pegado.
- Antes de utilizar **tempolink® clear** no aplique ningún adhesivo que contenga metacrilatos, sellador dentinario ni desensibilizante.
- Se recomienda usar **smartprotect® / smartprotect® soft** antes de la inserción de la prótesis.
- **tempolink® clear** no contiene eugenol.
- En casos aislados, **tempolink® clear** puede provocar una sensibilización. En caso de que esto se produzca deberá interrumpirse el uso de **tempolink® clear**.
- No se recomienda extraer ni mezclar manualmente los componentes.
- Evite el contacto de los componentes con la piel y la mucosa.
- No deje ningún resto del material en la boca.

Solo para el uso dental.


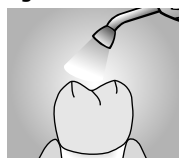



Fig. 7

Polimerización dual

fotopolimerización:

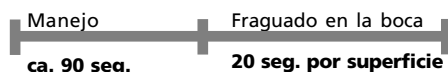

autopolimerización:

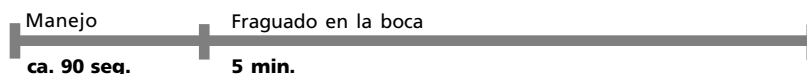

Campos de aplicación:

- Cementación temporal de coronas y puentes
- Cementación temporal de restauraciones permanentes

Características técnicas:

- **Volumen de mezcla:** 5 ml (mini-mix)
- **Dosificación:** 4:1
- **Colores del producto:** Base: transparente Catalizador: opaco
- **Tiempo de mezcla:** se suprime (sistema de mini-mix)
- **Tiempo de manejo:** aprox. 90 seg.
- **Tiempo en la boca:** fotopolimerización: 20 seg. por superficie autopolimerización: 5 min.
- **Manejo:** A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % humedad relativa.
- **Almacenaje:**



* a partir del inicio de la mezcla a 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5 % humedad relativa. Temperaturas más elevadas acortan los tiempos indicados, más bajos los prolongan.

Información

para el pedido:

tempolink® clear 02593
cartuchos c/u de 5 ml mini-mix 4:1
8 cánulas de mezcla, marrones 4:1

tempolink® single 02598
cartuchos c/u de 5 ml mini-mix 1:1
8 cánulas de mezcla, marrones 1:1

Cánulas de mezcla 4:1
de color marrón,
25 unidades **02591**

Cánulas de mezcla 1:1
de color marrón,
25 unidades **02761**

Безэвгенольный цемент для временной фиксации коронок и мостовидных протезов, двойного отверждения – материал на основе синтетических полимеров, содержащий триклозан



рис. 1

1. Очистка отпрепарированных поверхностей зуба

Перед фиксацией реставрации промыть отпрепарированные культи зуба водой. После предварительно проведенной дезинфекции поверхностей отпрепарированной культи зуба, полностью удалить остатки дезинфицирующих средств. Просушить область культи зуба и поверхность временной реставрации (рис. 1).

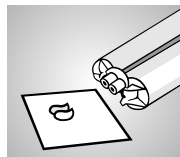


рис. 2

2. Замешивание и применение

С помощью смесителей «mini-mix» системы материал смешивается и выдавливается. Насадку вставить на корпус картриджа. Открутить колпачок картриджа. Перед установкой канюли для смешивания выпустить небольшое количество материала до тех пор, пока из обоих выходных отверстий картриджа не будет равномерно поступать материал (рис. 2). Для установки канюли для смешивания следовать отметкам на канюле и на картридже. Затем закрепить канюлю вращением в обратном направлении (рис. 3). Перед каждым применением выдавить и удалить небольшое количество материала. Благодаря точно подобранной степени давления при выдавливании материала его дозировка осуществляется индивидуально и точно. Выпустить материал при равномерном давлении. Канюлю для смешивания после употребления оставить на картридже до следующего пользования.



рис. 3

3. Установка временной реставрации

Нанести тонкий слой **tempolink® clear** на внутреннюю поверхность временных реставраций (рис. 4). Непосредственно после этого с небольшим давлением установить временные реставрации в необходимом положении на отпрепарированные зубы (рис. 5), затем с усилием прижать. Излишки материала удалить при помощи специального инструмента (рис. 6).



рис. 4

4. Время обработки / отверждение светом

Время обработки при комнатной температуре составляет ок. 90 сек. Отверждение при температуре тела происходит в течение примерно 5 мин., а вне полости рта замедляется. **Схватывание материала в любой момент может быть стимулировано и ускорено при помощи отверждения светом.** Для этих целей рекомендуется полимеризовать материал, воздействуя на него светом в течение 20 сек. (рис. 7) с каждой поверхности реставрации. При применении материала для временных реставраций с высокой опаковостью время отверждения светом увеличивается до 30-40 сек.

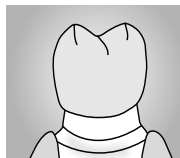


рис. 5

Важные указания по обработке материала

- **tempolink® clear** совместим с постоянными цементами.
- **tempolink® clear** не замедляет процесс отверждения композитных цементах и пломбирочных материалов.
- Чтобы избежать возможного прилипания **tempolink® clear** при использовании материалов для формирования культи зуба на основе композита, эти участки следует изолировать тонким слоем вазелина или глицерина.
- Перед применением **tempolink® clear** не наносить материалы для бондинга, запечатки дентинных канальцев и снятия повышенной чувствительности тканей зуба, содержащие метакрилаты.
- Перед установкой реставраций рекомендуется применять **smartprotect® / smartprotect® soft**.
- **tempolink® clear** не содержит эвгенол.
- В очень редких случаях **tempolink® clear** может вызывать сенсбилизацию. При наступлении соответствующих реакций применение **tempolink® clear** необходимо прекратить.
- Дозирование и смешивание компонентов материала вручную не рекомендуется.
- Избегать контакта отдельных компонентов с поверхностью кожи и слизистой оболочки.
- Не оставлять излишки материала в полости рта.
- Хранить при температуре не выше 25°C.



рис. 6

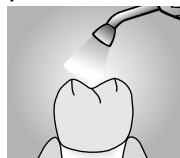


рис. 7


Только для применения в стоматологическом кабинете

Система двойного отверждения

при отверждении светом:



при самоотверждении:

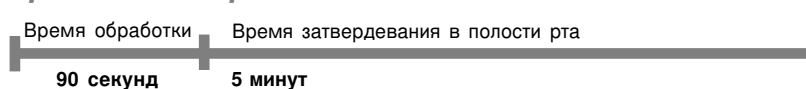

Области применения

- Временная фиксация коронок, мостовидных протезов и виниров
- Временная фиксация постоянных реставраций

Технические данные:

- **Объём смеси:** 5 мл. («mini-mix»)
- **Дозировка:** 4:1
- **Цвет продукта:** Основная паста: прозрачная
Катализатор: опаково
- **Время замешивания:** отпадает, «mini-mix»
- **Время обработки:** примерно 90 секунд*
- **Время затвердевания в полости рта:** Отверждение светом: 20 сек. на каждую поверхность
Самоотверждение: 5 мин.*
- **Обработка:** при 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% отн. влажности воздуха
- **Хранение:**



* с момента начала смешивания при 23 °C, 50 ± 5% отн. влажности воздуха. Высокие температуры сокращают, низкие температуры замедляют указанное время.

Информация по заказам:

tempolink® clear 02593
Картридж система «mini-mix», 5 мл.: 4:1
Канюли для смешивания, 8 штук, коричневые

tempolink® single 02598
Картридж система «mini-mix», 5 мл.: 1:1
Канюли для смешивания, 8 штук, коричневые

Канюли для смешивания, 4:1 02591
25 штук, коричневые

Канюли для смешивания, 1:1 02761
25 штук, коричневые

tempolink® clear



Istruzioni per l'uso

Cemento di fissaggio provvisorio, a indurimento duale, per corone e ponti, privo di eugenolo – a base di resina con triclosano

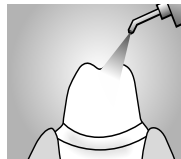


Fig. 1

1. Pulizia di preparazione

Prima della cementazione, pulire i monconi preparati con acqua. Se è stata precedentemente eseguita una disinfezione di preparazione, eliminare completamente i disinfettanti dalla superficie dei monconi. Asciugare l'area del moncone ed il provvisorio (Fig. 1).

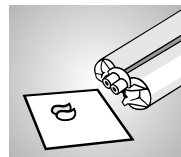


Fig. 2

2. Miscelazione e applicazione

Estrarre il prodotto con il sistema mini-mix. Inserire il punzone nel corpo della cartuccia. Svitare il tappo della cartuccia. Prima di inserire la cannula di miscelazione, estrarre una piccola quantità di materiale fino a quando dalle due aperture di uscita viene erogato materiale in modo uniforme (Fig. 2). Per applicare la cannula di miscelazione, utilizzare le guide su cannula e cartuccia. Interrompere il flusso girando di nuovo nel senso opposto (Fig. 3). Prima di qualsiasi applicazione, fare uscire e gettare un piccolo quantitativo. Il dosaggio può ora essere eseguito in maniera individuale. Erogare il materiale esercitando una pressione uniforme. Dopo l'uso, lasciare la cannula di miscelazione sulla cartuccia fino al prossimo impiego.



Fig. 3

3. Applicazione del provvisorio

Applicare uno strato sottile di **tempolink® clear** sul lato interno dei provvisori (Fig. 4). Posizionare i provvisori esercitando una leggera pressione sulle preparazioni (Fig. 5), quindi premere con forza. Eliminare il materiale in eccesso con uno strumento adeguato (Fig. 6).



Fig. 4

4. Tempo di lavorazione/fotoindurimento

Il tempo di lavorazione a temperatura ambiente ammonta a circa 90 secondi. L'indurimento a temperatura corporea avviene dopo ca. 5 minuti e può essere ritardato all'esterno del cavo orale. **La presa può essere supportata e ridotta in qualsiasi momento attraverso il fotoindurimento.** A questo proposito, si consiglia un tempo di esposizione di 20 secondi per superficie (Fig. 7). In caso di provvisori molto opachi, prolungare il fotoindurimento a 30-40 secondi.

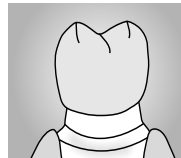


Fig. 5

Avvertenze importanti

- **tempolink® clear** è compatibile con cementi permanenti.
- **tempolink® clear** non ha alcuna azione ritardante sull'indurimento di cemento composito e materiale di riempimento composito.
- In caso di monconi a base di compositi, isolare queste aree con uno strato sottile di glicerina o vaselina per evitare qualsiasi adesione di **tempolink® clear**.
- Prima dell'impiego di **tempolink® clear**, non applicare leganti contenenti metacrilato, sigillanti dentinali o desensibilizzanti.
- Prima del posizionamento si consiglia l'uso di **smartprotect® / smartprotect® soft**.
- **tempolink® clear** non contiene eugenolo.
- In casi molto rari **tempolink® clear** può causare sensibilizzazione. In caso di reazioni, sospendere l'uso di **tempolink® clear**.
- Si sconsiglia il prelievo e la miscelazione manuale dei componenti.
- I singoli componenti non devono venire a contatto con cute o mucosa.
- Non lasciare residui di materiale nel cavo orale.

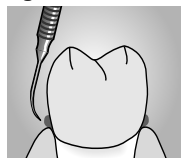


Fig. 6


Solo per uso dentale.




Fig. 7

Sistema indurimento duale

fotoindurimento:

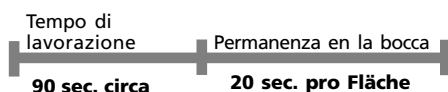

autoindurimento:

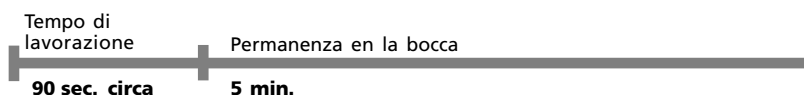

Ambiti d'impiego:

- fissaggio temporaneo di corone e ponti
- fissaggio temporaneo di restaurazioni permanenti

Dati tecnici:

- **Volume della miscela:** 5 ml (mini-mix)
- **Dosaggio:** 4:1
- **Colore del prodotto:** base: trasparente catalizzatore: opaco
- **Tempo di miscelazione:** esente (sistema mini-mix)
- **Tempo di lavorazione:** 90 sec. circa
- **Permanenza in bocca:** fotoindurimento: 20 sec. per superficie autoindurimento: 5 min.
- **Lavorazione:** A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% umidità relativa
- **Conservazione:**



* dall'inizio di miscelazione a 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% umidità relativa. Temperature più alte abbreviano e temperature più basse allungano i tempi indicati.

Specifiche di ordinazione:

tempolink® clear 02593
5 ml cartucce mini-mix 4:1
8 cannule misc. 4:1, marrone

tempolink® single 02598
5 ml cartucce mini-mix 1:1
8 cannule misc. 1:1, marrone

Cannule miscelazione 4:1
marrone, 25 pezzi **02591**

Cannule miscelazione 1:1
marrone, 25 pezzi **02761**

tempolink[®] clear



Geçici yapıştırma simanı, dual-sertleşen, kron ve köprüler için, öjenol içermeyen – triklosan içeren kompozit



Şekil 1




Şekil 2




Şekil 3



Şekil 4

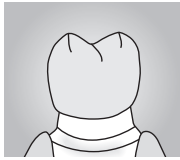

Şekil 5

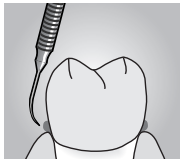

Şekil 6



Şekil 7

1. Preparasyonun temizliği

Simantasyon öncesi, preparasyonu su ile yıkayın. Eger, preparasyon önceden dezenfekte edilmişse, dezenfektanın tüm kalıntılarını yüzeyden temizleyin. Preparasyon alanını ve geçici restorasyonu kurutun (Şekil 1).

2. Karıştırma ve uygulama

Materyalin sıkılması, mini-mix sistem ile sağlanır. Pistonu kartuş gövdesine yerleştirin. Kartuşun kapağını çevirerek çıkarınız. Karıştırma kanülünü takmadan önce, her iki çıkıştan düzenli materyal çıkışı sağlanana kadar az miktarlarda materyal sıkınız (Şekil 2). Karıştırma kanülünü takarken, kanül ve kartuş üzerindeki olukların aynı hizada olmasına dikkat ediniz. Zıt yöne çevirerek kilitleyin (Şekil 3). Her uygulamadan önce bir miktar materyal sıkın ve atın. İstenilen miktar şimdi sıkılabilir. Materyali düzenli bir basınç ile sıkınız. Kullanım sonrasında, karıştırma kanülünü, bir sonraki uygulamaya kadar kartuş üzerinde bırakınız.

3. Geçici restorasyonun yerleştirilmesi

İnce bir tabaka tempolink® clear'ı geçici restorasyonun iç kısmına uygulayın (Şekil 4). Hemen sonra, geçici restorasyonu preparasyon üzerine, hafif basınç uygulayarak pozisyonlandırın (Şekil 5), sonra sağlam bir şekilde sıkıştırın. Mevcut fazla materyal varsa, uygun bir el aleti ile temizleyin (Şekil 6).

4. Çalışma süresi / ışıkla polimerizasyon

Oda sıcaklığındaki çalışma süresi yaklaşık 90 sn'dir. Vücut sıcaklığındaki polimerizasyon yaklaşık 5 dk sürer ve ağız dışında geciktirilebilir. Sertleşme, herhangi bir zamanda ışık polimerizasyonu ile desteklenebilir ve hızlandırılabilir. Bu amaç için, her yüzeye 20sn ışık tutmanızı tavsiye ederiz. (Şekil 7). Eğer geçici restorasyon çok opak ise, ışık uygulama süresini 30 - 40 sn'ye uzatın.

Önemli çalışma önerileri

- tempolink® clear, daimi simanlar ile uyumludur.
- tempolink® clear, kompozit simanın ya kompozit restoratif materyalinin polimerizasyonunu geciktirici etkisi yoktur.
- Kompozit bazlı ve kor yapım restorasyonları olması halinde, bu alanları, tempolink® clear'ın adezyonunu durdurmak için, ince bir tabaka gliserin ya da vazelin uygulayarak izole ediniz.
- tempolink® clear kullanmadan önce, herhangi bir metakrilat bazlı adeziv, dentin örtücü ya da hassasiyet giderici uygulamayın.
- Simantasyon öncesi, smartprotect® / smartprotect® soft kullanımı önerilir.
- tempolink® clear öjenol içermez.
- tempolink® clear çok nadir vakalarda hassasiyete sebep olabilir. Böyle bir reaksiyon olursa, tempolink® clear kullanımına son verin.
- Bileşenlerin el ile temizlenmesi ve karıştırılması tavsiye edilmez.
- Bileşenlerin cilt ya da mukoza tabakası ile temasını engelleyin.
- Ağız içinde materyal kalıntısı bırakmayın.


Yalnızca uzman kişilerce kullanılır.

Dual-sertleşen sistem

Işıklı polimerizasyon:



Kendi kendine polimerizasyon:

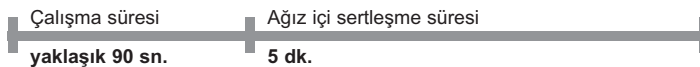

Uygulamalar:

- Kron ve köprülerin geçici yapıştırılması
- Daimi restorasyonların geçici yapıştırılması

Teknik veriler:

- Karışımın hacmi: 5 ml (mini-mix)
- Karıştırma oranı: 4:1
- Renk kodu: Baz: şeffaf Katalizör: opak
- Karıştırma süresi: uygulanmaz (mini-mix)
- Çalışma süresi: yaklaşık 90 sn.
- Ağızda sertleşme süresi: Işıklı kurlenme: 20 sn her yüzeye Kendi kendine: 5 dk
- Uygulama: 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5% bağıl nemde
- Depolama:



* karıştırmanın başından itibaren, 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F, 50 ± 5% bağıl nemde, yüksek sıcaklıklar belirtilen süreleri hızlandırır, düşük sıcaklıklar geciktirir.

Sipariş bilgisi:

tempolink® clear 02593
kartuş, 5 ml mini-mix 4:1
8 karıştırma kanülü 4:1,
kahverengi

tempolink® single 02598
kartuş, 5 ml mini-mix 1:1
8 karıştırma kanülü 1:1,
kahverengi

Karıştırma kanülü 4:1 02591
kahverengi, 25 adet

Karıştırma kanülü 1:1 02761
kahverengi, 25 adet